



造影用耐圧チューブ

# CT用エクステンションチューブ

## ショートタイプ ラインナップ

### 特長



#### プライミングキャップ使用方法

プライミングキャップの先端を上向きにセットし、薬液を注入しライン内のエア抜きをします。  
余分な薬液がキャップから漏れにくく、清潔にご使用できます。

- ☆造影検査時のルート確保用として、短い耐圧チューブをご用意しました。
- ☆三方活栓のコック形状は、1バータイプと3バータイプよりお選びできます。


プライミングキャップ



ロックリングコネクタ



三方活栓

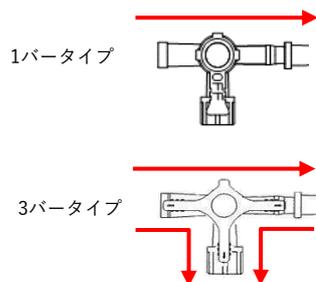

1バータイプ

3バータイプ

### 仕様

| 型式                 | 内径×外径 (mm) | 長さ (mm) | 内容量 (mℓ) | 三方活栓 コック      | プライミング キャップ | 耐圧性能             | 入数             | JANコード        |
|--------------------|------------|---------|----------|---------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| FGM-CTX-80-1B      | 1.5 × 3.0  | 80      | 0.1      | 1バー (360° 回転) | 無           | 1.47Mpa (213psi) | 50本/箱 (4箱/ケース) | 4547319471696 |
| FGM-CTX-250-1B     |            | 250     |          |               |             |                  |                | 4547319471634 |
| FGM-CTX-250-1BP    |            | 250     | 0.4      |               | 有           |                  |                | 4547319471641 |
| FGM-CTX-250-1BPT   |            | 250     |          |               |             |                  |                | 4547319471313 |
| FGM-CTX-250-3BP(S) |            | 250     |          |               |             |                  |                | 3バー (360° 回転) |

※

※可塑剤DEHPフリー製品

一般の名称：造影用耐圧チューブ  
販売名：CT用エクステンションチューブ  
認証番号：302AABZX00018000



フォルテ グロウ メディカル 株式会社



●使用上の注意事項

- 1) ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3) 水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4) 本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5) 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売業者

 **フォルテ グロウ メディカル 株式会社**

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地  
東京営業所 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3683-1905  
<https://www.fgm.co.jp/>

販売元

 **ORTメディカル株式会社**

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F  
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760  
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289  
<https://www.ort-medical.jp/>

取扱販売店